

A woman is shown sleeping peacefully, lying on her side. She is wearing a nasal cannula for CPAP therapy. On her left wrist, she has a blue CIDELEC polygraph device. The device has several icons on its screen, including a hand, a person, and a brain, and the brand name 'CIDELEC' is visible. The background is dark, suggesting a bedroom at night.

**HYPNEA 3**

# Polygraphe CIDELEC

Écouter pour mieux  
comprendre

  
**CIDELEC**

# Explorez les fonctionnalités uniques d'Hypnea 3 et comment elles redéfinissent le diagnostic du sommeil.

## Unique

Associé au **PneaVoX**, Hypnea 3 intègre les sons trachéaux bruts ré-écoutables pour une compréhension améliorée de la pathologie et une pédagogie patient facilitée.

## Intuitif

Une solution pensée pour le patient. Son interface intuitive et sa vidéo tutoriel s'adaptent à tous les profils pour une pose en toute autonomie.

## Modulaire

Grâce à une interface Bluetooth intégrée, Hypnea 3 peut acquérir les signaux provenant de modules optionnels (EMG Jambier, enregistrement sous machine, ...)

## Technologique

Association idéale entre design et technologie de pointe, Hypnea 3 intègre la fonction **HypnoLight**.

## Compact


Son format compact, sa légèreté et son bracelet en silicone assurent un confort optimal, garantissant des données fiables toute la nuit.

## Durable

Facilement réparable, moins énergivore et équipé de capteurs réutilisables, Hypnea 3 minimise son impact environnemental.



## Spécifications techniques

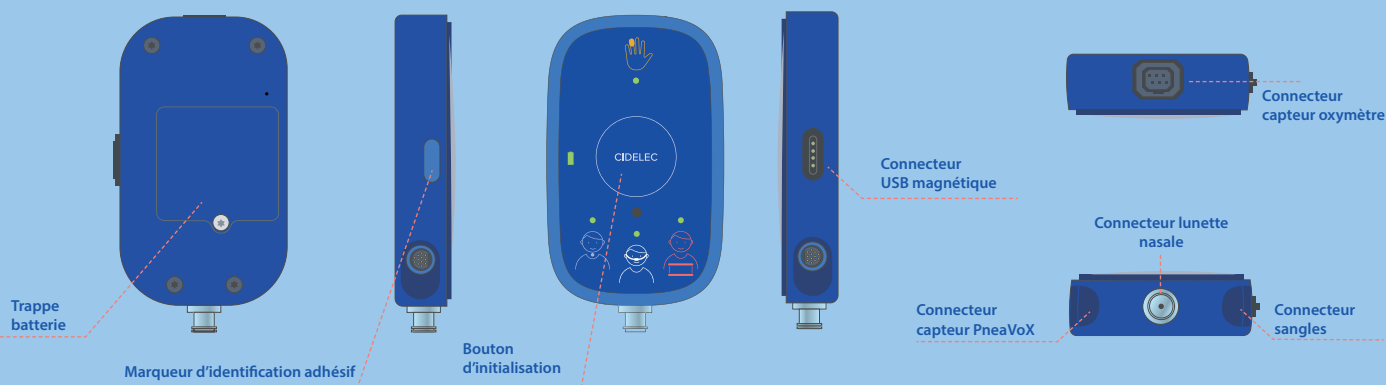

## Caractéristiques

Signaux disponibles	Pression susternale, flux respiratoire, ronflement, pression nasale, efforts thoracique et abdominale, ronflements, sons bruts, luminosité, position, actimétrie, SpO2, BPM, PPG. En option : HLT ExG, EMG, PTA, Thermocouple
Signal de sons bruts	2KHz
Interface sans-fils	Bluetooth® V5.0 (BLE)
Capacité mémoire	256Mo, temps de transfert de 20s (hors sons bruts)
Source d'alimentation	Batterie 720mAh LiPo, charge en 4h

## Nos travaux et publications scientifiques :



PneaVoX :  
[www.cidelec.net/pneavox/](http://www.cidelec.net/pneavox/)



HypnoLight :  
[www.cidelec.net/hypnolight/](http://www.cidelec.net/hypnolight/)



Charge Hypoxique :  
[www.cidelec.net/charge-hypoxique/](http://www.cidelec.net/charge-hypoxique/)

[www.cidelec.net](http://www.cidelec.net)